

## Komikapp Aktivität-Schürze

### Allgemeine Vorsichtsregeln – Sicherheit


- Die Komikapp Aktivität-Schürze darf nicht ohne Aufsicht bei Personen verwendet werden, die orientierungslos sind.
- Anwender, die die Schürze nicht selbst abziehen können, müssen stets unter Aufsicht sein.
- Die Aktivität-Schürze verfügt über lange Seitenbänder, die nur um den Körper / die Taille des Patienten gebunden werden dürfen. Bitte beachten Sie, dass die Aktivität-Schürze nicht dazu gedacht ist, die Bewegungsfreiheit eines Menschen einzuschränken oder ihn aus Sicherheitsgründen zu fixieren.
- Durch die langen Seitenbänder besteht Verhedderungsgefahr sowie erhöhtes Stolper- oder Sturzrisiko.
- Achten Sie auf Strangulationsgefahr durch das verstellbare Nackenband.
- Die Komikapp Aktivität-Schürze enthält Kleinteile und darf bei Kindern unter 3 Jahren nicht ohne Aufsicht verwendet werden.

### Tipp

Anhänger passend für den Anwender wechseln, z. B. Schlüsselbund, spannende Schlüsselanhänger, Klangkugel ...

### Pflegehinweise

- Die Aktivität-Schürze ist bis 40 °C waschbar.
- Nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen und nicht chemisch reinigen.
- Zubehör (Anhänger etc.) vor dem Waschen abnehmen und am besten separat von Hand waschen.

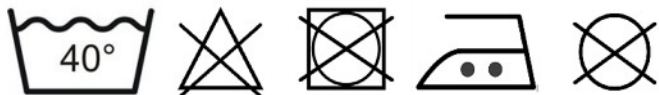

## Tablier d'activité Komikapp

### Règles générales de prudence – Sécurité

#### Sécurité

- Le tablier d'activités Komikapp ne doit pas être utilisé sans surveillance auprès de personnes désorientées.
- Les utilisateurs qui ne peuvent pas retirer le tablier eux-mêmes doivent être surveillés en permanence.
- Le tablier d'activités possède de longues lanières latérales qui ne doivent être attachées qu'autour du corps / de la taille du patient. Veuillez noter que le tablier d'activités Komikapp n'est pas conçu pour restreindre la liberté de mouvement d'une personne ni pour la fixer pour des raisons de sécurité.
- En raison des longues lanières latérales, il existe un risque d'enchevêtrement ainsi qu'un risque accru de trébuchement ou de chute.
- Faites attention au risque de strangulation dû au tour de cou réglable.
- Le tablier d'activités Komikapp contient de petites pièces et ne doit pas être utilisé sans surveillance chez les enfants de moins de 3 ans.

#### Un petit conseil

Changer les accessoires selon les préférences de l'utilisateur, par ex. un porte-clés, des breloques intéressantes, une boule sonore...

#### Conseils d'entretien

- Le tablier d'activités est lavable à 40 °C.
- Ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas nettoyer à sec.
- Retirer les accessoires (breloques, etc.) avant le lavage et les laver séparément à la main.

